

Наименование изделия **Электронные детские весы "Я расту!" BF20510**

Дата продажи " ____ " _____ 200__ года

Подпись продавца _____

Штамп продавца _____

Подпись клиента _____

Условия гарантии:

1. Высокое качество изделия гарантируется при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в Руководстве пользователя.
Срок гарантии - 1 год со дня продажи через розничную сеть.
Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут устранены бесплатно в сервисном центре.

2. Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:

- предъявление правильно и четко заполненного гарантийного талона;
- наличие оригинала товарного чека, содержащего дату покупки;
- предъявление неисправного изделия.

Сервисный центр может отказать в гарантийном ремонте в случаях:

- нарушения сохранности гарантийных пломб;
- модификации и ремонта, выполненного лицом, не уполномоченным.

3. Гарантия предусматривает бесплатную замену запчастей и выполнение ремонтных работ, но не распространяется на неисправности, вызванные следующими причинами:

- механические повреждения, попадание внутрь жидкости и других посторонних предметов;
- химической коррозии, применения некачественных элементов питания;
- удар молнии, пожар, затопление или другие стихийные бедствия;
- эксплуатации изделия с нарушением инструкции пользователя.

4. Условия гарантии также не предусматривают периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом, включая все типы батареек.

С условиями гарантии согласен _____

Подпись клиента

Адрес сервисного центра:

109444 Россия, Москва, ул. Ташкентская, д.9, офис 3.
Тел.: (495) 130-92-65.

Электронные детские весы сконструированы для того, чтобы помочь Вам отслеживать изменения в росте и весе Вашего ребенка.

Функция «TARE», позволяет вам взвешивать ребенка, не учитывая вес пеленки, на которой лежит малыш.

Функция «WEIGHT-BLOCK» показывает точный вес ребенка, даже если Ваш малыш не лежит спокойно.

Максимальный вес измерения этих весов 20 кг.

Градуйровка измерения 10 гр.

Когда ребенок подрастет, взвешивание может происходить без использования чаши весов: ее можно снять, превратив весы в напольные.

Новая **функция измерения роста** позволяет вам отслеживать рост Вашего ребенка.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед тем, как использовать весы. Сохраните инструкцию на будущее для возможных ссылок в случае возникновения вопросов.

Советы по использованию

Устанавливайте весы только на плоскую и жесткую поверхность (если установить весы на мягкую поверхность это может привести к неправильным и неточным показаниям).


Если вы используете весы без чаши, следите за тем, чтобы ребенок стоял на весах ровно, не облачаясь на что-либо. Ступни ребенка должны стоять параллельно друг к другу. Обратите внимание то, что ребенок должен стоять спокойно, пока вес измеряется.

Во время измерения роста ребенок должен быть под наблюдением взрослого.

Установка батареек

При установке батареек используйте только 9V алкалайновые батарейки.

Снимите крышку с отсека для установки батарей на нижней части весов. Вставьте батарейку согласно указанной полярности и закройте крышку.

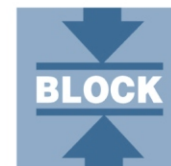

Функциональные клавиши

ON кнопка включения весов

OFF кнопка выключения весов

SELECT UNIT (UNIT) нажмите на эту кнопку для установки единиц измерения, которые вам нужны: килограммы или фунты.

Максимальный измеряемый вес данных весов 20кг (градуировка 10 г) или 44,40 фунтов (градуировка ½ унции).

Если после включения весов дисплей показывает 0,00 значит измерение будет производиться в килограммах и граммах.

Если дисплей показывает 0:0 значит измерение будет производиться в фунтах и унциях.

HOLD (BLOCK WEIGHT FUNCTION) из-за того, что ребенок постоянно находится в движении, весы показывают разный вес. Когда вы положите ребенка в чашу весов, нажмите кнопку «HOLD». На дисплее будет мигать надпись «HOLD», это означает, что весы автоматически высчитывают вес ребенка исходя из всех полученных данных. Когда мигание прекратиться, дисплей покажет вес ребенка.

Функция TARE

Используйте данную функцию, если вы взвешиваете ребенка на пеленке.

1. Включите весы. Дисплей покажет «8888»
 2. Дождитесь, пока на дисплее не появится изображение «0,00».
 3. Положите на весы пеленку.
 4. Нажмите на кнопку «TARE» и дождитесь пока не появится «0,00». После этого весы готовы к работе.
- MODE весы оснащены новой функцией ростомер.

Измерение роста ребенка

Когда ребенок уже может стоять самостоятельно, то можно измерять его рост.

1. Снимите чашу с весов и включите весы. На дисплее появится «8888».
2. Дождитесь, пока на дисплее не появится «0,00»
3. Поставьте ребенка на весы, как показано на картинке на стр.1.
4. Нажмите «MODE». На дисплее появится «0,0 см»
5. Потяните на 2-3см. вверх ручку, расположенную над дисплеем и установите её согласно рисунку «А».
6. Потяните ручку медленно вверх, как показано на рисунке «В».

РИСУНОК "А"

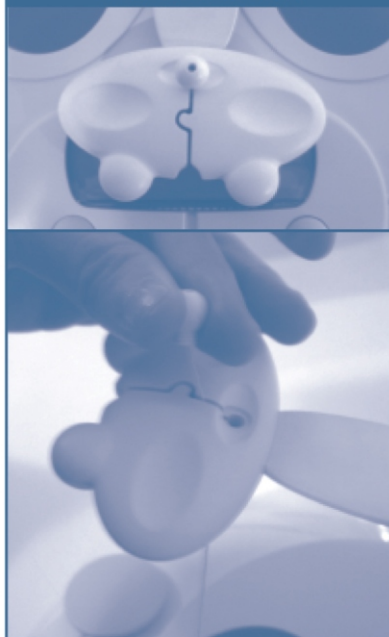


РИСУНОК "В"



7. Дисплей покажет рост ребенка в см. Надпись «HOLD» указывает на то, что данные зафиксированы.

8. После окончания измерений медленно опустите ручку вниз и установите её в исходное положение.

Использование весов с чашей

1. Удалите 4 резиновые заглушки
2. Установите чашу на весы
3. Нажмите кнопку «ON» (дисплей покажет «8888»)
4. Дождитесь, пока на дисплее не появится «0,00»
5. Положите ребенка на весы и дождитесь, пока весы не покажут его вес.
6. Нажмите кнопку «OFF» чтобы выключить весы

Если вы не нажали кнопку «OFF», то весы выключатся автоматически через 2 минуты, если вы их не будете использовать.

Использование весов без чаши

Вы можете использовать весы без чаши, когда ребенок может стоять самостоятельно и весит меньше 20 кг.

Снимите чашу с весов и вставьте резиновые заглушки. Включите весы и дождитесь, пока на дисплее не появится «0,00».

Поставьте ребенка на весы.

Примечание:

Берегите весы от резких температурных изменений, попадания влаги, ударов, пыли и прямых солнечных лучей

Не роняйте и не стучите по весам

Храните весы в местах, удаленных от источников тепла (батарей и т.д.)

Не прыгайте на весах

Чистите весы с влажной тряпкой

Чистите нижнюю часть весов только сухой тряпкой

Не используйте при чистке химические и шлифующие средства

Следите за тем, чтобы жидкости не попадали в весы, т.к. они не водонепроницаемые

Не используйте весы во влажном месте (более 85% влажности) - это может привести к коррозии и оказывать негативное воздействие на точность весов

Обозначения

- LO указывает на низкий заряд батарейки. Замените её.
- ERR вес слишком большой
- Весы готовы к использованию, когда на дисплее горит «0,00». Если данная инструкция не соблюдалась, на дисплее будет «ERR» или “---“

Технические данные

- Диапазон измерений: веса - 10 гр 20 кг, роста - 30см 150см
- Градуировка: 10 гр
- Батареи: 9V типа 6LR61
- Условия для работы: 0С + 50С RH 85%
- Условия хранения: 0С + 50С RH 85%
- Размеры: 28,5 x 55 x 16 см
- Вес: 2,9 кг.