


### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Dr. Mind с пультом дистанционного управления
- Адаптер
- Батарейки (4 x AA)
- Наушники

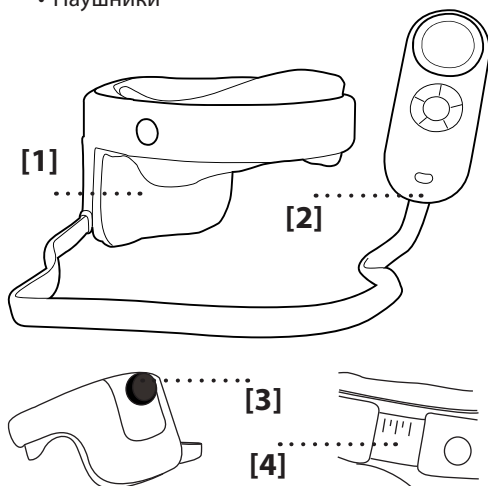

[1] Массажер для головы Dr. Mind

- Зона Вибрации и функция Подогрева
- Зона Акупрессуры воздушной подушкой

[2] Пульт дистанционного управления

[3] Ручка настройки размера

[4] Индикатор настройки размера

### НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Присоедините адаптер к Dr. Mind и к источнику электропитания. Для мобильного использования: снимите крышку пульта дистанционного управления и вставьте батарейки. Снова закройте крышку.

Указание: Убедительная просьба использовать либо адаптер либо батарейки. Не используйте их одновременно.

### ОБОРУДОВАНИЕ / ФУНКЦИИ

Данный массажер легко одевается на голову, а с помощью пульта дистанционного управления можно выбрать различные функции. В зависимости от выбора функций мягко массируются специальные точки надавливания на висках, на передней и задней части головы. Заданная комбинация тепла, вибрации и музыки напрямую положительно влияет на Ваше настроение.

Приятные ощущения во всем теле незамедлительно подарят Вам блаженство и глубокое расслабление.

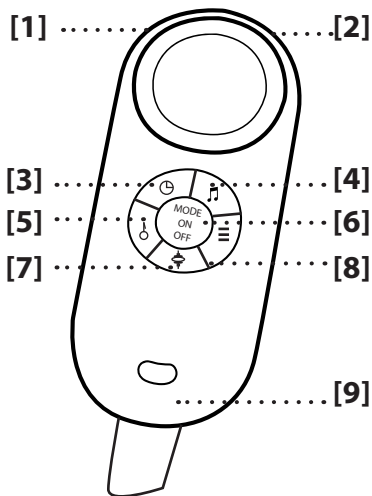

ВИБРАЦИЯ ДАВЛЕНИЕ ПРОГРЕВ МУЗЫКА

### ФУНКЦИИ

#### ВИБРАЦИЯ

При нажатии кнопки «Вибрация» включается автоматическая программа массажа. Через регулируемые интервалы надавливание на массируемые места будет меняться. Данный режим массажа возвращает бодрость и работоспособность.

#### ВОЗДУШНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Во время акупрессуры расположенные особым образом воздушные подушки массируют специальные точки на голове. Они снимают напряжение с шеи и задней части головы, а также уменьшают головную боль. Точечный массаж стимулирует важнейшие акупунктурные точки на висках и задней части головы. Он обеспечивает приятное ощущение во всем теле и снимает стресс.

#### ПРОГРЕВ

Функция прогрева стимулирует обмен веществ, оказывает поддерживающее действие при простуде и снимает напряжение в области шеи.

#### МУЗЫКА

Данная функция предлагает широкий выбор мелодий, которые улучшат Ваше физическое и духовное самочувствие.

Все функции можно выбрать как по отдельности, так и вместе. Важно: при плохом самочувствии кнопка вентиляции обеспечивает немедленный выпуск воздуха из камеры сжатого воздуха.

### ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

#### [1] Подключение наушников

#### [2] Подключение электропитания (для адаптера)

#### [3] Настройка времени

Нажатием данной кнопки можно изменить заданное по умолчанию время в 15 минут. С помощью многократного нажатия Вы можете выбрать между 5, 10 или 15 минутами.

#### [4] Настройка музыки

Данная кнопка (короткое нажатие) активирует функцию музыки. Воспроизводятся различные успокаивающие мелодии: музыка, исполняемая на фортепиано, журчание воды, пение птиц, звук морских волн, стрекот сверчков, капающая вода. С помощью повторного короткого нажатия можно поменять мелодии. Чтобы включить музыку, необходимо нажать на кнопку и удерживать ее.

#### [5] Функция подогрева

Однократное нажатие активирует подогрев.

Для выключения нажмите на кнопку еще раз.

#### [6] Вкл. / Выкл. / Режим

Однократное нажатие включает массажер.

Включается стандартный режим.

- настройка времени: 15 минут
- расслабляющая музыка: включена
- режим давления воздуха: включен
- вибрация: выключена
- прогрев: выключен

Повторное нажатие активирует режим массажа.

Давление воздуха, прогрев и вибрация функционируют вместе. Для отключения аппарата Dr. Mind необходимо нажать на кнопку и удерживать ее.

#### [7] Давление воздуха

Данная кнопка включает / выключает функцию давления воздуха. Включенный режим давления воздуха автоматически проходит четыре различных интервала.

#### [8] Вибрация

Данная кнопка включает / выключает функцию вибрации. Включенный режим вибрации автоматически проходит различные вибрационные интервалы: сильный, быстрый, медленный, мягкий.

#### [9] Вентиляционный клапан

С помощью данной кнопки в любой момент можно уменьшить давление воздуха.

### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации массажера внимательно прочтите следующие правила, чтобы достичь безупречного функционирования прибора и его оптимального воздействия. Просьба сохранять Правила в течение всего времени эксплуатации.

- Массажер соответствует общепринятым техническим принципам и современным требованиям к безопасности.
- Аппарат не требует специального обслуживания. В случае возможных неполадок ремонт может производиться только уполномоченными специалистами. Нецелевое применение аппарата и неавторизованный ремонт запрещены из соображений безопасности и приведут к утрате гарантий.
- Никогда не трогайте вилку мокрыми руками.
- Избегайте попадания на аппарат воды, не подвергайте воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Если аппарат длительное время не используется, отсоедините кабель питания от розетки, чтобы избежать короткого замыкания.
- Не используйте аппарат с поврежденной вилкой, шнуром или разболтанными местами крепления. Если вилка или шнур повреждены, их следует заменить у производителя, в сервисном центре или с привлечением квалифицированного персонала.
- Чтобы не превышать уровень воздействия на мышечную и нервную системы, не нарушайте рекомендованное время массажа в 30 минут.
- При нарушениях в работе немедленно отключите аппарат от электропитания. Использование не по назначению или неправильное использование исключают всякую ответственность производителя за причиненный ущерб.
- Чтобы не превышать уровень воздействия на мышечную и нервную системы, не нарушайте рекомендованное время массажа в 30 минут.
- Любой массаж, даже мануальный противопоказан в случае беременности или, если области массажа (одна или несколько) подвержены любому из перечисленных заболеваний: недавние травмы, тромбозы, воспаления и опухоли любого происхождения, а также рак.

- Для использования аппарата в лечебных целях рекомендуется консультация с врачом.
- Никогда не используйте острые предметы во время пользования массажером.
- Перед использованием массажера рекомендуется снять контактные линзы, а также заколки и украшения для волос.
- Включайте массажер лишь после того, как Вы одели его на голову.
- Не используйте массажер во время поездки на автомобиле.
- Если Вы используете электронные приборы, например, сердечный стимулятор, на каждый раз перед массажем Вам необходимо проконсультироваться с врачом.

### ХРАНЕНИЕ / УХОД

С помощью регулярного ухода Вы продлите срок службы Вашего Dr. Mind и одновременно обеспечите его надежную работу.

1. Рекомендуется хранить в сухом защищенном от пыли месте.
2. Хранить Dr. Mind вдали от жидкостей или открытого огня.
3. Протирать массажер сухой мягкой салфеткой.
4. Если Вы не используете Dr. Mind, отсоедините его от электросети.

### ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Устранение
Аппарат подключен к сети питания, но ни сам прибор, ни пульт управления не работают.	<p>Проверьте присоединение к адаптеру.</p> <p>Проверьте, правильно ли вставлены батарейки.</p> <p>При очень долгом использовании аппарат может перегреться. Выключите его и дайте охладиться в течение 30-50 минут.</p> <p>Поменяйте батарейки.</p>
Давление воздуха и вибрация слишком «слабые».	Поменяйте батарейки.

### ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

Соответствует директиве 2006/95/ЕС

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 22,7 x 19,9 x 12,8 см  
 Размеры пульта ДУ: 15,8 x 13,2 x 4,3 см  
 Масса: 625 г  
 Номинальное напряжение: 4,5 Вт  
 Батарейки: 4 x 1,5 В АА  
 Адаптер: 4,5 В постоянного тока, 1000 м  
 Сертификаты:



### Генеральный импортер в России:

ООО «Альфа БС»  
 109518, Москва,  
 ул. Грайвороновская, д.4 стр.1

тел: (495) 229-45-32  
 факс: (495) 229-45-33

Эл. адрес: info@casada.ru  
 Адрес в интернете: www.casada.ru

Авторское право на изображение и тексты принадлежит «Casada International GmbH» они не могут быть использованы иначе, нежели с явного согласия владельца.

Авторское право © 2012 г.  
 Casada International GmbH  
 Все права защищены.

