

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

INFRAPED II



< relax in style



time to *relax*

WITH CASADA

С момента своего основания в 2000 году название CASADA ассоциируется с высококачественными продуктами в области здоровья и фитнеса.

Сегодня приборы CASADA можно приобрести более чем в 40 странах мира. Продукты CASADA постоянно совершенствуются, отличаются неповторимым дизайном и неизменной нацеленностью на улучшение качества жизни, они надежны и их качество безупречно.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Купив этот массажер, Вы подтвердили, что заботитесь о своем здоровье. Просим Вас внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации. Выполнение и соблюдение рекомендаций, указанных в Инструкции, позволит Вам наслаждаться массажем в течение длительного времени.

Желаем Вам провести много приятных минут с Вашим личным **INFRAPED II**.

- 5 Массаж ступней
- 6 Правила безопасности
- 7 Начало эксплуатации
- 7 Технические характеристики
- 8 Комплектация/функции
- 9 Клавиши управления/пульт дистанционного управления
- 10 Рефлекторные зоны стопы
- 12 Поиск неисправностей
- 12 Хранение
- 12 Декларация соответствия требованиям ЕС
- 13 Гарантийные условия



Массаж ступней - это одна из форм воздействия на рефлекторные зоны. Такой массаж часто относят к лечебным методам альтернативной медицины.

Массаж ступней зародился в Китае, он также часто применяется в Таиланде. В развитых индустриальных государствах данный вид массажа, как правило, применяется для улучшения общего самочувствия в рамках программ здорового образа жизни.

На ступнях ног находятся нервные окончания, связанные с внутренними органами, каждому внутреннему органу соответствует определенная зона стопы. Согласно представлениям азиатской медицины ступни ног – своеобразная карта человеческого тела. Воздействуя на рефлекторные точки, можно стимулировать активность внутренних органов или оказывать успокаивающее воздействие.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



Перед началом эксплуатации аппарата для массажа внимательно прочтите следующие правила, чтобы достичь безупречного функционирования прибора и его оптимального воздействия. Просьба сохранять Правила в течение всего времени эксплуатации.

- Массажный аппарат соответствует общепринятым техническим принципам и современным требованиям к безопасности.
- Аппарат не требует специального обслуживания. В случае возможных неполадок ремонт может производиться только уполномоченными специалистами. Нецелевое применение аппарата и неавторизованный ремонт запрещены из соображений безопасности и приведут к утрате гарантий.
- Никогда не трогайте вилку мокрыми руками.
- Избегайте попадания на аппарат воды, не подвергайте воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Если аппарат длительное время не используется, отсоедините кабель питания от розетки, чтобы избежать короткого замыкания.
- Не используйте аппарат с поврежденной вилкой, шнуром или разболтанными местами крепления. Если вилка или шнур повреждены, их следует заменить у производителя, в сервисном центре или с привлечением квалифицированного персонала. При нарушениях в работе немедленно отключите аппарат от электропитания. Использование не по назначению или неправильное использование исключают всякую ответственность производителя за причиненный ущерб.
- Дети могут пользоваться аппаратом только под присмотром взрослых.
- Чтобы не превышать уровень воздействия на мышечную и нервную системы, не нарушайте рекомендованное время массажа в 15 минут.
- Никогда не используйте острые предметы во время пользования массажером.
- Любой массаж, даже массаж ступней противопоказан, если Вы беременны или если **область массажа** подвержена одному из перечисленных заболеваний: недавние травмы, тромбозы, воспаления и опухоли любого происхождения, а также рак. Для использования аппарата в лечебных целях рекомендуется консультация с врачом.
- Если Вы используете электронные приборы, например сердечный стимулятор, **каждый раз** перед массажем Вам необходимо проконсультироваться с врачом.

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

- Перед началом эксплуатации проверьте соответствие напряжения в сети напряжению, указанному на штепсельной вилке прибора и присоедините прибор к сети. После этого включите массажный аппарат при помощи пульта управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер:	40 x 38 x 20 см
Вес:	5,6 кг
Напряжение:	Переменный ток ~ 240 В, 50 Гц
Номинальная мощность:	60 Вт
Время работы, автоматически:	15 минут

Сертификация:





Нашим ступням приходится нас носить - и им это удается! – каждый день, когда мы работаем, занимаемся спортом и проводим свободное время. Вознаградите за это ноги оздоровительным и снимающим напряжение массажем при помощи **INFRAPED II**.

INFRAPED II разработан в соответствии с требованиями в отношении эргономики. Специальные технические приспособления аппарата позволяют проводить ротационный вибрационный массаж, который схож с вибрационным массажем, но является более интенсивным, оказывающим более глубокое воздействие.

INFRAPED II способен доставить удовольствие Вашим ступням при помощи различных программ. При помощи клавиш на самом приборе или на пульте дистанционного управления можно выбрать одну из трех автоматических программ массажа. Вручную можно регулировать скорость, а подключив режим подогрева, Вы завершите комплексное воздействие массажа.



[1] МАССАЖНАЯ ОБЛАСТЬ

Расположите ступни параллельно в углублениях

[2] СЕТЬ

Вкл./Выкл.

[3] ПОДОГРЕВ

Включение функции подогрева

[4] РЕЖИМ P1/P2/P3

Выбор программы массажа

[5] +/-

Ручная настройка скорости

[6] ТАЙМЕР

Отображение времени массажа

РЕФЛЕКТОРНЫЕ ЗОНЫ СТОПЫ

Рефлекторные зоны находятся, согласно учению, в прямой связи с внутренними органами. Через специальные акупунктурные точки их можно стимулировать или успокаивать, при таком воздействии могут быть также облегчены болезненные симптомы. Можно достичь положительного результата, например, при мигрени, болезненных менструациях, заболеваниях системы кровообращения, проблемах пищеварения, ревматизме, заболеваниях мочевого пузыря и многих других болезнях.


Массаж ступней оказывает позитивное влияние на кровоснабжение всего тела – от этого выигрывает сердечнососудистая система, а также иммунная система. Кроме того вечерний массаж ступней способствует быстрому засыпанию. Устойчиво повышается восстанавливающий эффект сна.

Доказано, что регулярный массаж ступней позволяет избавиться от «эффекта холодных ног»: улучшается кровообращение пятки и пальцев, и Вам больше не придется страдать от «эффекта холодных ног». Это важный элемент в предотвращении простудных заболеваний.



РЕФЛЕКТОРНЫЕ ЗОНЫ СТОПЫ

Мускулатура ступни имеет не только регенерирующую функцию. Через рефлекторные точки ступни можно оказывать позитивное и гармонизирующее воздействие почти на все органы тела.

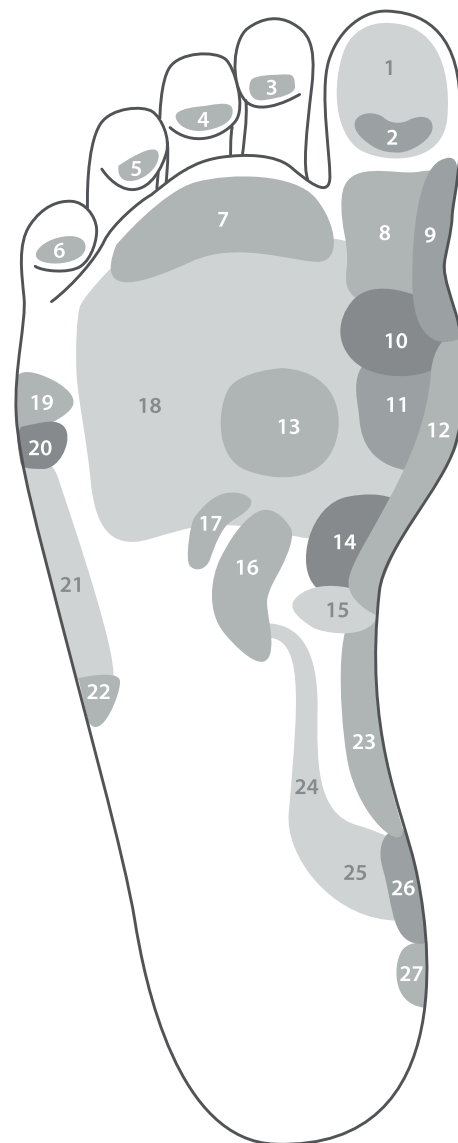

1. Головной мозг
2. Мозжечок
3. Глаз
4. Глаз
5. Миндалины
6. Миндалины
7. Надплечья
8. Затылок
9. Шейный отдел позвоночника
10. Щитовидная железа/шея
11. Сердце
12. Грудной отдел позвоночника
13. Диафрагма
14. Желудок
15. Поджелудочная железа
16. Почка
17. Надпочечник
18. Легкое
19. Плечевой сустав
20. Подмышечный лимфатический узел
21. Плечо
22. Локоть
23. Поясничный отдел позвоночника
24. Мочеточники
25. Мочевой пузырь
26. Крестец
27. Копчик

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	УСТРАНЕНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> Аппарат подключен к сети питания, но ни сам прибор, ни пульт дистанционного управления не работают. 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте присоединение к сетевому кабелю. При очень долгом использовании аппарат может перегреться. Выключите его и дайте охладиться в течение 30-40 минут.

ХРАНЕНИЕ

1. Рекомендуется хранить в сухом, защищенном от пыли месте с размотанным кабелем.
2. Не хранить рядом с системами отопления и открытым огнем. Не подвергать непосредственному воздействию солнечных лучей.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

Соответствует Директиве 2006/95/ЕС

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Компания-продавец предоставляет предусмотренный законом срок гарантии на изделие, описание которого дано на обратной стороне. Срок гарантии начинается с даты покупки. Дата покупки указывается на товарном и кассовом чеках.

Гарантия не распространяется на детали, подвергающиеся износу. Претензия по гарантии не принимается, если причиной обнаруженного дефекта является внешнее воздействие или последствия ремонта или изменения конструкции массажера, которые были произведены не компанией-производителем или авторизованной компанией продавцом.

Гарантия, предоставляемая продавцом, ограничивается ремонтом или заменой изделия. В рамках данной гарантии производитель или продавец не берет на себя дальнейшей ответственности и не отвечает за ущерб, причиненный в результате несоблюдения правил эксплуатации и/или неправильного использования изделия.

Если в результате проверки изделия компанией-продавцом будет установлено, что претензия по гарантии относится к дефекту, на который не распространяется гарантия, или что срок гарантии уже истек, расходы по проверке и ремонту оплачивает покупатель


Производитель

Casada GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderbon, Germany
Tel.: (+49) 52 54 9 30 98 0
www.casada.de
info@casada.de

Эксклюзивный представитель в России

ООО «Альфа Бизнес Кооперэйшн»
142784, Московская область, дер. Румянцево
Бизнес Парк «Румянцево», стр.2, оф. 412В
Тел.: (+7) (495) 228 32 93
www.casada.ru
info@casada.ru

Авторское право на изображения и тексты принадлежит « Casada GmbH», они не могут быть использованы иначе, нежели с явного согласия владельца. **Copyright © 2010 « Casada GmbH». Все права защищены.**

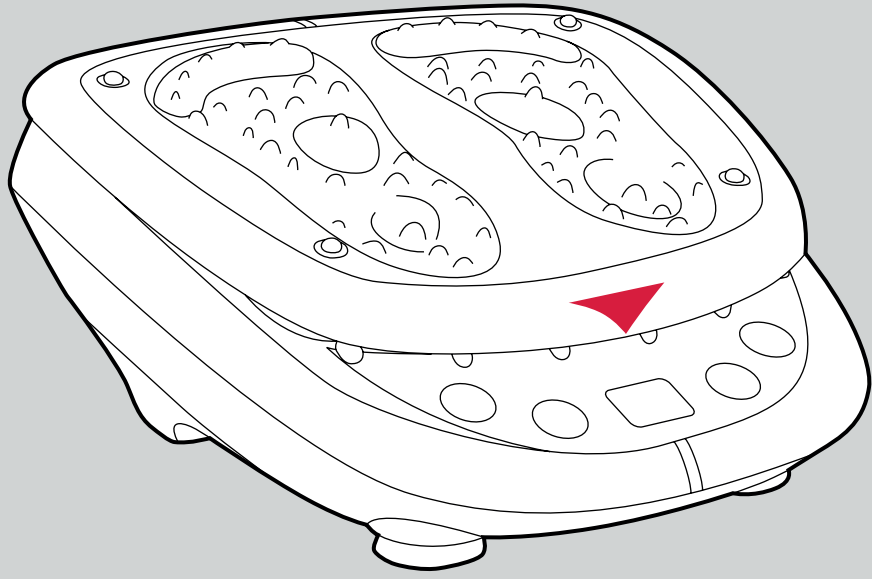

< relax in style