

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

REFLEXOPED II

relax in style





time to *relax*

WITH CASADA

С момента своего основания в 2000 году название CASADA ассоциируется с высококачественными продуктами в области здоровья и фитнеса.

Сегодня приборы CASADA можно приобрести более чем в 40 странах мира. Продукты CASADA постоянно совершенствуются, отличаются неповторимым дизайном и неизменной нацеленностью на улучшение качества жизни, они надежны и их качество безупречно.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Купив этот массажер, Вы подтвердили, что Вы заботитесь о своем здоровье. Просим Вас внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации. Выполнение и соблюдение рекомендаций, указанных в Инструкции, позволит Вам наслаждаться массажем в течение длительного времени.

Желаем Вам провести много приятных минут с Вашим личным **REFLEXOPED II**.

- 5 Массаж ступней
- 6 Правила безопасности
- 7 Начало эксплуатации
- 7 Технические характеристики
- 8 Комплектация/функции
- 9 Панель управления
- 10 Рефлекторные зоны ступней
- 12 Поиск неисправностей
- 12 Хранение
- 12 Декларация соответствия
 требованиям ЕС
- 13 Гарантийные условия



Массаж ступней зародился в Азии. Тем не менее в европейских странах данному виду массажа также уделяется много внимания. Как правило, он применяется для улучшения общего самочувствия в рамках программ здорового образа жизни.

Согласно представлениям восточной медицины ступни ног – своеобразная карта человеческого тела. Воздействуя на рефлекторные точки, можно стимулировать активность внутренних органов или оказывать успокаивающее воздействие.

Благодаря **REFLEXOPED II** Вы в любое время сможете делать восточный массаж дома.

Правила безопасности



Перед началом эксплуатации аппарата для массажа внимательно прочтите следующие правила, чтобы достичь безупречного функционирования прибора и его оптимального воздействия. Просьба сохранять Правила в течение всего времени эксплуатации.

- Массажный аппарат соответствует общепринятым техническим принципам и современным требованиям к безопасности.
- Аппарат не требует специального обслуживания. В случае возможных неполадок ремонт может производиться только уполномоченными специалистами. Нецелевое применение аппарата и неавторизованный ремонт запрещены из соображений безопасности и приведут к утрате гарантий.
- Никогда не трогайте вилку мокрыми руками.
- Избегайте попадания на аппарат воды, не подвергайте воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Если аппарат длительное время не используется, отсоедините кабель питания от розетки, чтобы избежать короткого замыкания.
- Не используйте аппарат с поврежденной вилкой, шнуром или разболтанными местами крепления. Если вилка или шнур повреждены, их следует заменить у производителя, в сервисном центре или с привлечением квалифицированного персонала. При нарушениях в работе немедленно отключите аппарат от электропитания. Использование не по назначению или неправильное использование исключают всякую ответственность производителя за причиненный ущерб.
- Дети могут пользоваться аппаратом только под присмотром взрослых.
- Чтобы не превышать уровень воздействия на мышечную и нервную системы, не нарушайте рекомендованное время массажа в 15 минут.
- Никогда не используйте острые предметы во время пользования массажером.
- Любой массаж, даже массаж ступней противопоказан, если Вы беременны или если **область массажа** подвержена одному из перечисленных заболеваний: недавние травмы, тромбозы, воспаления и опухоли любого происхождения, а также рак. Для использования аппарата в лечебных целях рекомендуется консультация с врачом.
- Если Вы используете электронные приборы, например, сердечный стимулятор, **каждый раз** перед массажем Вам необходимо проконсультироваться с врачом.

Начало эксплуатации

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

- Перед началом эксплуатации проверьте штепсельную вилку прибора и присоедините прибор к сети. После этого включите массажный аппарат с помощью кнопки ВКЛ.

Технические характеристики

Размер:	24,5 x 41 x 15 см
Вес:	3,4 кг
Напряжение:	Переменный ток 230 В, 50 Гц
Номинальная мощность:	40 Вт
Время работы, автоматически:	15 минут
Сертификация:	





Наши ноги испытывают нагрузку независимо от того, работаем ли мы, занимаемся спортом или находимся на отдыхе. Побалуйте свои ноги благотворным и расслабляющим массажем с помощью **REFLEXOPED II**.

REFLEXOPED II – это одновременно расслабление и укрепление мышц ступней с помощью 24 массажных головок. Благодаря вращающимся массажным движениям стимулируются различные рефлекторные зоны ступней. Таким образом, активируется не только кровоснабжение усталых ног, но и оказывается непосредственное воздействие практически на все другие части тела. Скорость устанавливается вручную. В зависимости от положения массажера встроенная функция нагрева позаботится о кончиках пальцев или пятках.

REFLEXOPED II имеет широкую область применения: он может также применяться в области икр и бедер, где благодаря активации циркуляции крови он используется для профилактики целлюлита.

Чехол можно легко снять и промыть.

Через 15 минут массажер автоматически отключается. Для повышения срока службы мотора включать массажер рекомендуется лишь спустя 30 минут. За это время мотор успевает охладиться. Вашему организму также требуется подобная пауза для отдыха. Мы рекомендуем делать массаж не более двух-трех раз в день во избежание чрезмерной нагрузки на мускулатуру.

Для Вашей безопасности мы оснащаем все аппараты защитой от перегрева. При сильной нагрузке и высоком давлении вследствие нажатия в моторе возникает тепло. Прежде чем оно станет источником опасности, аппараты отключаются автоматически и включаются лишь после соответствующего простоя, продолжающегося от 30 до 40 минут.



[1] ОБЛАСТЬ МАССАЖА

Поставьте ступни параллельно массажному ролику, обтянутому тканью.

[2] ВАННОЧКА ДЛЯ СТУПНЕЙ

Создает комфортную опору для ступней во время массажа.

[3] НАГРЕВ

Подключение функции нагрева

[4] + / -

Ручная регулировка скорости

[5] ВКЛЮЧЕНИЕ

Вкл./Выкл.

Рефлекторные зоны ступней

Рефлекторные зоны находятся, согласно учению, в прямой связи с внутренними органами. Через специальные акупунктурные точки их можно стимулировать или успокаивать, при таком воздействии могут быть также облегчены болезненные симптомы. Можно достичь положительного результата, например, при мигрени, болезненных менструациях, заболеваниях системы кровообращения, проблемах пищеварения, ревматизме, заболеваниях мочевого пузыря и многих других болезнях.

Массаж ступней оказывает позитивное влияние на кровоснабжение всего тела – от этого выигрывает сердечнососудистая система, а также иммунная система. Кроме того вечерний массаж ступней способствует быстрому засыпанию. Устойчиво повышается восстанавливающий эффект сна.


Доказано, что регулярный массаж ступней позволяет избавиться от «эффекта холодных ног»: улучшается кровообращение пятки и пальцев, и Вам больше не придется страдать от «эффекта холодных ног». Это важный элемент в предотвращении простудных заболеваний.



REFLEXOPED II без матерчатого чехла. Вращающиеся ролики различной формы стимулируют рефлекторные точки и таким образом заботятся о Вашем общем хорошем самочувствии.

Рефлекторные зоны ступней

Мускулатура ступни имеет не только регенерирующую функцию. Через рефлекторные точки ступни можно оказывать позитивное и гармонизирующее воздействие почти на все органы тела.

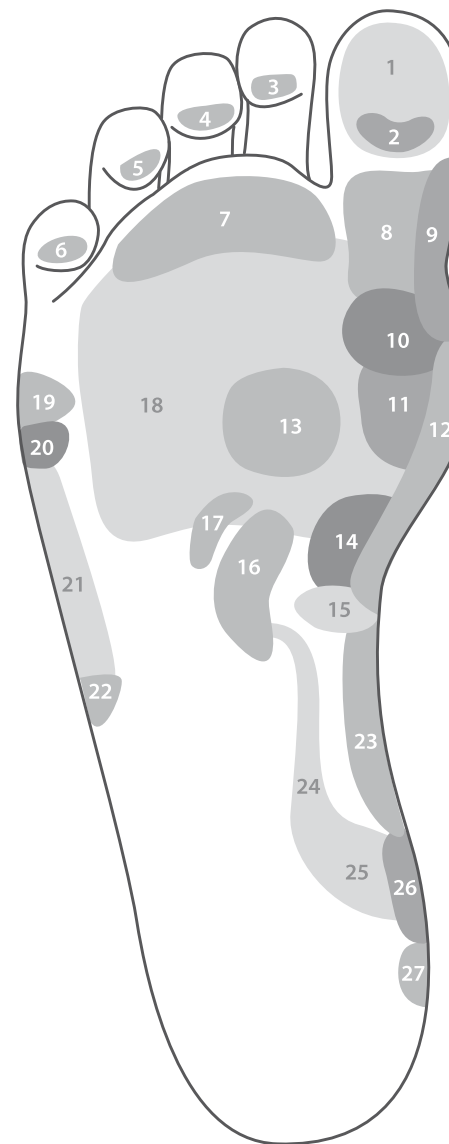

1. Головной мозг
2. Мозжечок
3. Глаз
4. Глаз
5. Миндалины
6. Миндалины
7. Надплечья
8. Затылок
9. Шейный отдел позвоночника
10. Щитовидная железа/шея
11. Сердце
12. Грудной отдел позвоночника
13. Диафрагма
14. Желудок
15. Поджелудочная железа
16. Почки
17. Надпочечник
18. Легкое
19. Плечевой сустав
20. Подмышечный лимфатический узел
21. Плечо
22. Локоть
23. Поясничный отдел позвоночника
24. Мочеточники
25. Мочевой пузырь
26. Крестец
27. Копчик

Поиск неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	УСТРАНЕНИЕ
Аппарат подключен к сети питания, но ни сам прибор, ни панель управления не работают.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте присоединение к сетевому кабелю.• При очень долгом использовании аппарат может перегреться. Выключите его и дайте охладиться в течение 30-40 минут.

Хранение

1. Рекомендуется хранить в сухом, защищенном от пыли месте с размотанным кабелем.
2. Не хранить рядом с системами отопления и открытым огнем. Не подвергать непосредственному воздействию солнечных лучей.

Декларация соответствия требованиям ЕС

Соответствует Директиве 2006/95/ЕС.

Гарантийные условия

Компания-продавец предоставляет предусмотренный законом срок гарантии на изделие, описание которого дано на обратной стороне. Срок гарантии начинается с даты покупки. Дата покупки указывается на товарном и кассовом чеках.

В случае если дефект изделия будет обнаружен в пределах Германии, то такое изделие будет бесплатно отремонтировано или заменено. Вышеуказанное не распространяется на быстроизнашивающиеся детали такие как, например, материал покрытия. В данном случае прибор вместе с товарным и кассовым чеками должен быть отправлен для ремонта в соответствии с условиями и сроками гарантийного периода.

Претензия по гарантии не принимается, если причиной обнаруженного дефекта является внешнее воздействие или последствия ремонта или изменения конструкции, которые были произведены не компанией-производителем или авторизованной компанией-продавцом.

Гарантия, предоставляемая продавцом, ограничивается ремонтом или заменой изделия. В рамках данной гарантии продавец не берет на себя дальнейшей ответственности и не отвечает за ущерб, причиненный в результате несоблюдения правил эксплуатации и (или) неправильного использования изделия.

Если в результате проверки изделия компанией-продавцом будет установлено, что претензия по гарантии относится к дефекту, на который не распространяется гарантия, или что срок гарантии уже истек, расходы по проверке и ремонту оплачивает покупатель.

Casada Group GmbH
Obermeisters Feld 3
33104 Paderbon, Germany
tel.: (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 0
fax: (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 30
Email: info@casada.com
Internet: www.casada.com

Эксклюзивный представитель в России
ООО «Альфа Бизнес Кооперэйшн»
142784, Московская область, дер. Румянцево
Бизнес Парк «Румянцево», стр.2, оф. 412В
Тел.: (+7) (495) 228 32 93
Эл. почта: info@casada.ru
Интернет: www.casada.ru

Авторское право на изображение и тексты принадлежит CASADA Group GmbH, они не могут быть использованы иначе, нежели с явного согласия владельца.
Copyright © 2010 CASADA Group GmbH. Все права защищены

